



Manual Orthros barnesete

Dine notater



Gratulerer med din nye Orthros

Vil du sykle uten bekymringer? Med Orthros ønsker vi å gjøre livet ditt enklere. Du vil nok heller dra på tur enn å lese bruksanvisningen. Derfor har vi satt sammen en bruksanvisning som inneholder den viktigste og mest nødvendige informasjonen om sikker bruk av Orthros. Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Orthros, og følg alltid instruksjonene i bruksanvisningen.

For å hjelpe deg med å få mest mulig ut av sykkelen din, vil jeg underveis dele ulike tips slik at du kan fortsette å sykle trygt og fornøyd.

Vi vil gjerne høre om dine opplevelser og hvor du liker å sykle. Vil du dele dem med oss på Facebook? Vi vil gjerne høre fra deg!

Kevin
Mekaniker for Orthros



Innhold

Dine notater	2
Generelt	5
Indikasjoner og bruk	5
Garanti	6
Montering av barnesetet på Orthros	8
Produktbeskrivelse	10
Bunnbrakett, kranksett og pedaler	10
Armlener	11
Monteringsdeler	11
Optimal bruk	12
Justering av pedalavstand	12
Justering av setedybde	14
Justering av ryggstøttevinkelen	14
Justering av motstanden på kranksettet	15
Vedlikehold av Orthros	16
Rengjøring.....	16
Skifte av deler	16
Spesifikasjoner.....	17
Ytterligere informasjon	18
Kontaktinformasjon til Huka.....	18
Endringer	19
Salg av Orthros.....	19
Fjerning av produkt.....	19

Generelt

INDIKASJONER OG BRUK

Barnesetet er et setesystem for Orthros tandemsykkel, designet for barn som ønsker å sykle med, men som er for små for standardsetet på Orthros.

Barnesetet er designet for å sikre at syklisten har god oversikt over veien og god kontakt med passasjerer.

- Barnesetet er enkelt å montere på en standard Orthros tandemsykkel. Monteringsanvisninger finnes i denne bruksanvisningen.
- Det er ditt ansvar å montere barnesetet riktig i henhold til monteringskravene som er beskrevet i denne håndboken
- Syklist/ledsager må kunne bevege seg selvstendig og kan ikke ha fysiske eller kognitive tilstander som hindrer sikker deltakelse i trafikken, for eksempel syns- eller hørselshemming.
- Maksimal brukervekt for barnesetet finnes i avsnittet Tekniske spesifikasjoner og må ikke overskrides.
- Det valgfrie barnesetet er beregnet på én person.

GARANTI


Huka gir 5 års garanti på rammen til barnesetet, samt 2 års garanti på de øvrige delene. Alle garantisaker håndteres av din lokale Huka-forhandler.

Garantien gjelder ikke for skader eller feil forårsaket av feil eller uaktsom bruk. Vurderingen av dette gjøres av Huka B.V. eller en av Huka B.Vs representanter.


- Garantien gjelder ikke for deler som er utsatt for slitasje.
- Huka kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for spesielle skader eller følgeskader som skyldes uaktsomhet fra brukeren av Orthros, selv om Huka har blitt gjort oppmerksom på slike skader.
- Gjeldende lovgivning kan innebære at begrensninger eller unntak fra ansvar og erstatningsplikt ikke er tillatt. I slike tilfeller vil ovennevnte begrensninger eller unntak ikke gjelde for deg.
- Garantien og produktansvaret generelt kan bortfalle dersom instruksjonene i denne håndboken ikke er fulgt. Dette skjer dersom uautorisert vedlikeholdsarbeid, tekniske modifikasjoner eller utvidelser er utført uten Hukas samtykke og ved bruk av ikke-originale Huka-deler. Dette vil også ugyldiggjøre CE-merkingen. Fraværet av en CE-erklæring kan føre til problemer med forsikring av sykkelen og i tilfelle skade eller erstatningsansvar.

TIPS FRA KEVIN Skriv ned rammenummeret til din Orthros nedenfor. Nummeret er viktig ved garantikrav, reparasjoner eller, i tilfelle sykkelen din blir stjålet, for å anmelde det til forsikringsselskapet ditt. Du finner nummeret på rammerøret under det høyre setet.

Rammenummer

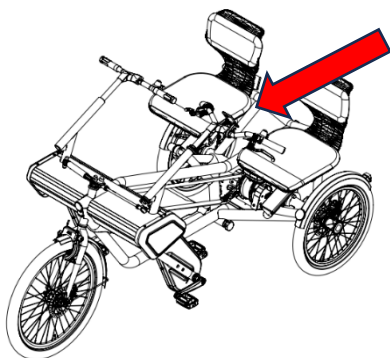

Plassering av identifikasjonsklistremerke

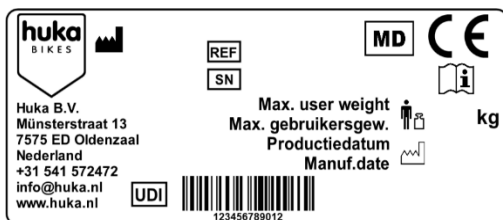


Eksempel på identifikasjonsklistremerke

Montering av barnesetet på Orthros

Barnesetet er enkelt å montere på en standard Orthros. Følg disse trinnene for å montere barnesetet.

1. Løsne de fire M6-unbrakoskruene og fjern dem fra setet. Hold setet fast mens du fjerner skruene for å hindre at setet faller av. Vær gjerne to personer om nødvendig.
2. Fjern standardsetet, inkludert glideskinnen, fra sykkelrammen og legg det til side.
3. Ta det ferdigmonterte barnesetet og sett det mellom festetappene på sykkelrammen.
4. Fest setet med de fire M6-sekskantboltene og bruk de fire medfølgende M6-låsemutterne og skivene til å stramme boltene.



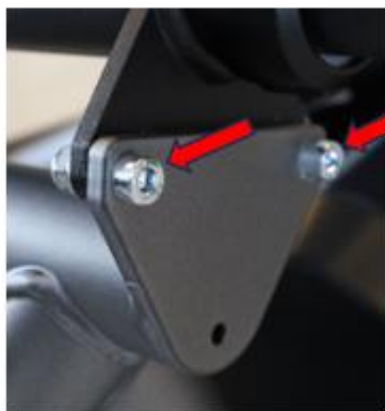

Foran 2x M6



Bak 2x M6

Produktbeskrivelse

Orthros barnesetet består av flere ulike komponenter. I dette avsnittet beskriver vi de viktigste komponentene.

RAMME

Rammen på barnesetet består av en rørkonstruksjon i metall, supplert med deler i aluminium og plast. De fleste metalledene er fosfatbehandlet og deretter overflatebehandlet med et slagfast pulverlakk. Denne konstruksjonen og overflatebehandlingen garanterer mange års sykkelglede.

BUNNBRAKETT, KRANKSETT OG PEDALER

- Bunnbraketten er vedlikeholdsfri, og tråkkmotstanden er justerbar. Hvis det er for mye slark i lagrene, bør du kontakte din lokale Huka-forhandler. Hvis det oppstår slark mellom kranksettet og bunnbraketten, fjern støvhetten fra midten av kranksettet og stram bolten under ved hjelp av en 13 mm nøkkel.
- De fleste pedaler er vedlikeholdsfrie. Når du monterer pedalene selv, må du være oppmerksom på merkene L (venstre) og R (høyre) på pedalakslene. Stram venstre pedal ved å vri den mot klokken. Stram høyre pedal ved å vri den med klokken. Bruk en 15 mm skiftenøkkel eller en spesiell (smal) pedalnøkkel. Har du problemer med montering av pedaler, kontakt din Huka-forhandler.
- Det finnes ulike typer pedaler som ekstrautstyr.



Når du justerer pedalavstanden, må du sørge for at knotten på glidesystemet og hurtigklemmen er skikkelig strammet, slik at gliderøret ikke beveger seg mens du sykler.

ARMLENER

Armlenet på barnesetet er laget av stål og er utstyrt med mykt skum. Armlenet er utformet slik at høyden og dybden er innstilt for alle tiltenkte bruksområder.



Barnesetet må alltid være sikkert festet. Kontroller dette regelmessig. Et løst sete kan føre til farlige situasjoner.

MONTERINGSDELER

Det er viktig at alle deler på sykkelen er sikkert montert. Ulike deler må strammes til et bestemt moment. Bruk en momentnøkkel til dette. Tabellen nedenfor viser de riktige momentverdiene. Er du i tvil, kontakt din Huka-forhandler for veiledning.

Del	Strammemoment
Glidebolter M6 (4x)	12 Nm
Knott for pedalgliderør	Håndstrammet
Justeringsknott for motstand i bunnbraketten	Etter behov
M8-bolter for justering av ryggstøttevinkelen	25 Nm



Hvis komponentene ikke strammes til riktig, kan det føre til farlige situasjoner. Følg de angitte strammemomentene.


Optimal bruk

Når din nye Orthros tandemsykkel leveres til deg, skal de ulike komponentene være riktig justert til deg og tilpasset dine preferanser. For å sikre at du sitter komfortabelt, finnes det justeringsmuligheter for å tilpasse setesystemet.

JUSTERING AV PEDALAVSTAND

Følg disse trinnene for å justere pedalavstanden:

1. Åpne hurtigutløseren ved å bevege håndtaket oppover.
2. Drei knotten to omdreininger mot klokken for å låse opp gliderøret.
3. Flytt pedalene til ønsket posisjon ved å skyve røret fremover eller bakover. Pedalene vil også endre høyde for å oppnå den beste sittestillingen.
4. Drei knotten med klokken for å stramme den godt, og beveg om nødvendig gliderøret litt frem og tilbake for å sjekke at det sitter godt fast i understellet.
5. Lukk hurtigutløseren

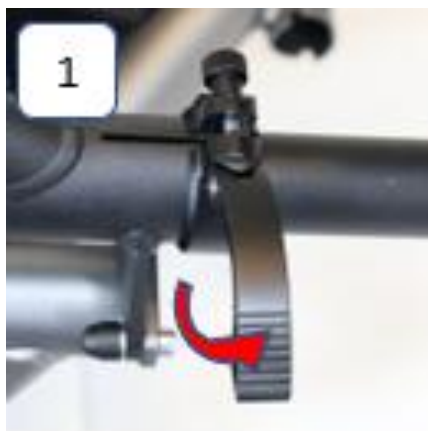



TIPS FRA KEVIN: En god tommelfingerregel for å justere setet: Sett deg i barnesetet med krankarmene på linje med seteskinnen. Med hælene på pedalen skal du akkurat kunne strekke ut beinet.



Sadel og styre må være godt festet. En løs sadel eller et løst styre øker risikoen for farlige situasjoner i trafikken.

JUSTERING AV SETEDYBDEN


Det er mulig å flytte seteputen litt fremover eller bakover i forhold til ryggstøtten.

1. Løsne de 4 unbrakoskruene på undersiden av setet to omdreininger.
2. Skyv setet fremover eller bakover til ønsket posisjon
3. Stram de 4 unbrakoskruene godt igjen

JUSTERING AV RYGGSTØTTEVINKELN

Ryggstøttens vinkel kan justeres individuelt og bidrar til å skape en god sittestilling.

1. Bruk en unbrakonøkkel til å løsne de to M8-boltene til venstre og høyre for ryggstøttejusteringen tre omdreininger.
2. Vipp ryggstøtten til riktig posisjon og fest den igjen med begge boltene til venstre og høyre. Beveg ryggstøtten litt mens du strammer, slik at du kan kjenne at justeringshakkene går ordentlig i hverandre

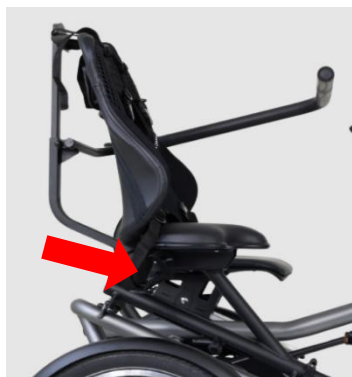

3. Stram boltene godt. Se side 11 for strammemoment.



Mens du strammer, beveger du ryggstøtten litt frem og tilbake slik at du kjenner at justeringshakkene går ordentlig i hverandre. Dette forhindrer at ryggstøtten løsner, noe som kan føre til farlige situasjoner.

TIPS FRA KEVIN: Sørg for at setet og pedalene er riktig justert før du begynner å sykle. Dette vil hjelpe deg med å opprettholde en god og hensiktsmessig sittestilling på sykkelen.

JUSTERING AV MOTSTANDEN I BUNNBRACKETTEN

Motstanden i bunnbraketten kan justeres etter ønske ved hjelp av den svarte dreieknappen på toppen av bunnbrakettskallet.

1) Drei knappen med klokken for å øke motstanden, slik at pedalene blir tyngre å tråkke.

2) Drei på knappen mot klokken for å redusere motstanden, slik at pedalene blir lettere å tråkke.



Vedlikehold

Optimal kjørekomfort oppnås ved at du holder sykkelen i god stand. I dette avsnittet viser vi deg hvordan du gjør dette. Vi anbefaler også at du får utført et årlig servicebesøk hos en autorisert Huka-forhandler. De kan sjekke Orthros for funksjonalitet, sikkerhet og eventuelle slitasjeskader.



Etter 200 kilometer eller 2 måneder må du få utført det første servicebesøket hos din Huka-forhandler. De vil sjekke skrueforbindelser, kjede- og eikespenning osv. Hvis du ikke får utført vedlikeholdet hos en Huka-forhandler, kan dette påvirke garantien.

RENGJØRING

Rengjør sykkelens regelmessig. Du kan gjøre dette ved å bruke varmt såpevann sammen med et mildt vaskemiddel. Felgene kan rengjøres med varmt vann og en myk børste. Ikke bruk stålbørste da dette vil skade felgene. Bruk av høytrykksspyler anbefales ikke. Blant annet vil det høye trykket blåse smøremidlet ut av lagrene. Det er greit å skylle med hageslange, så lenge strålen ikke er for kraftig.

UTSKIFTING AV DELER

Er Orthros-sykkelen din defekt, eller må deler byttes ut? Vi anbefaler at du får dette gjort hos din Huka-forhandler. Dette er en av måtene å sikre at produsentgarantien forblir gyldig.



Sørg alltid for at det monteres originale Huka-deler på sykkelens. Din Huka-forhandler kan bestille disse direkte fra oss og montere dem.

Spesifikasjoner

Beskrivelse	Standardversjon
Rammemateriale	Stål
Belegg	Epoxybelegg for utendørs bruk
Seter	Polstret sete kledd med kunstlær
Tilvalg	Se bestillingsskjema
Garanti	2 år, med unntak av deler som er utsatt for slitasje
Teknisk levetid	7 år
Vekt	10 kg
Lengde pedalarm	90 mm
Benlengde	310–550 mm
Høyde fra sadel til gulv	570–680 mm
Ryggstøttehøyde	890 mm
Maksimal belastning / sete	30 kg

Mer informasjon

TIPS FRA KEVIN Har du spørsmål om vedlikehold av Orthros? Din Huka-forhandler hjelper deg gjerne. Vi gir også tips om vedlikehold av side-by-side-sykkelen din i denne håndboken.

HUKA KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål om utviklingen av produktet vårt? Eller har du forslag til forbedring av Huka-sykler? Ta gjerne kontakt med oss.

Munsterstraat 13
7575 ED Oldenzaal
+31541-572472
info@huka.nl
www.huka.nl

For spørsmål angående vedlikehold av din Orthros, vennligst kontakt din lokale Huka-forhandler.

ENDRINGER

Huka følger en filosofi om kontinuerlig produktutvikling og forbedring. Som et resultat av dette kan det leverte produktet avvike fra bildene som vises. Huka BV forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet, som beskrevet i denne brukerhåndboken. Det påtas ikke noe ansvar i denne forbindelse. Med forbehold om trykkfeil. For den mest oppdaterte versjonen av håndboken, besøk www.huka.nl/handleiding.

For den nyeste versjonen av bruksanvisningen, besøk www.huka.nl/handleiding.

SALG AV ORTHROS

Hvis du ønsker å selge Orthros-sykkelen eller barnesetet til en annen bruker, er det viktig å overlevere all nødvendig teknisk dokumentasjon, slik at den nye eieren kan bruke sykkelen på en sikker måte.

Få sykkelen inspisert av din Huka-forhandler før salg for å sikre at Orthros selges i god stand. Ønsker du å kjøpe en brukt Huka-sykkel? Da anbefaler vi at du får den sjekket av din Huka-forhandler på forhånd. De kan raskt se om sykkelen viser tegn på slitasje eller har skjulte feil.

AVHENDING AV PRODUKT

Bruker du ikke lenger Orthros eller barnesetet? Ta da kontakt med din Huka-forhandler. De kan hjelpe deg med et eventuelt salg eller innbytte. Hvis du ønsker å avhende Orthros, kan du også kontakte din lokale avfallshåndteringsvirksomhet. De vil avhende sykkelen i henhold til de regler og forskrifter som gjelder i ditt område.

Huka gjør livet ditt enklere

For å imøtekomme de enkelte syklistenes behov på best mulig måte, mener vi at god service er avgjørende! Huka er kjent for sin utmerkede service og sitt dype engasjement. Eier du en Huka-sykkel og ønsker du å få utført regelmessig vedlikehold? Våre forhandlere utfører gjerne alt vedlikeholdsarbeid for deg!

Din Huka-forhandler

Huka 0541-572 472 info@huka.nl

20   in 



Huka gjør livet ditt enklere www.huka.nl